

PORTUGUÊS



ESPAÑOL

DIGITUBES® com Epithelium™

INDICAÇÕES

Aliviar as pressões e a dor e evitar a formação de calosidades dorsais e interdigitais.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Não utilizar sobre uma lesão cutânea.
- Casos de pessoas que sofrem de arterite, diabetes, polineurite, neuropatia dos membros inferiores ou úlcera: pergunte ao seu médico ou podologista, em seguida, monitorizar o seu pé durante a utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- Recortar com uma tesoura, segundo o comprimento desejado.
- Retirar a película de proteção, virar o Digitube® do avesso, de forma a obter uma espécie de manga e colocar no local, sobre o dedo do pé, assegurando que o gel Epithelium™ está em contacto com a zona a proteger.

FUNCIONALIDADES

- O Epithelium™ é um gel de silicone, patenteado por podologistas, cujas características visco-elásticas e mecânicas se assemelham aos tecidos da pele. Distribui as pressões e diminui a fricção, que está na origem da formação de calos.
- Boa aderência e espessura fina, sem causar desconforto entre os dedos, mesmo quando utilizado em dedos adjacentes.



CONSERVAÇÃO

- Lavável à mão, sem esfregar.
- Deixar secar naturalmente. Não passar a ferro.

COMPOSIÇÃO: 73% silicone, 27% de tecido em poliamida/elastano.

Os materiais foram submetidos a todos os ensaios previstos e impostos pela ISO 10 993-1 relativa aos produtos que entram em contacto com a pele. Se ocorrer algum incidente com a utilização do produto deverá interromper imediatamente a sua utilização e informar a empresa MILLET Innovation.

A empresa "MILLET Innovation", não pode ser responsável no caso de utilização que não esteja em conformidade com as recomendações do fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2001.

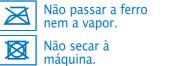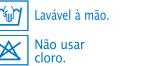

DANSK

DIGITUBES® con Epithelium™

INDICACIONES

Proteger los dedos de los pies o de las manos, evitar la formación de callos y ampollas y aliviar los dolores, etc.

CONTRAINDICACIONES

- No lleve sobre una lesión cutánea.
- En el caso de las personas que sufren arteritis, diabetes, polineuritis, neuropatías de los miembros inferiores o de úlceras: debén solicitar consejo a su médico o podólogo, y a continuación, mantener la vigilancia de su pie durante su uso.

PRECAUCIONES DE USO

- Corte un Digitube® al largo deseado, con unas buenas tijeras.
- Retire la película de protección que recubre el gel.
- Gire el Digitube® sobre si mismo y colóquelo en el dedo del pie poniendo la parte con el gel de Epithelium™ en contacto con la zona a proteger.

FUNCIONES

- El Epithelium™ es un gel de silicona cuyas propiedades de distribución de presiones son similares a las de los tejidos subcutáneos. La presencia de este material en los Digitubes® permite evitar la formación de callos y aliviar el dolor cuando las callosidades están ya formadas.
- Debido a su poco espesor, es posible utilizar Digitubes® simultáneamente en los dedos contiguos.



MANTEINIMENTO

- Lave a mano sin frotar.
- Deje secar al exterior. No lo planche.

COMPOSICIÓN: 73% silicona, 27% de tejido de poliamida/elastano.

Los materiales fueron sometidos a todos los ensayos previstos e impuestos por la norma ISO 10 993-1, relativa a los productos que entran en contacto con la piel. Si a pesar de ello sufre alguna molestia, deje de usar el producto inmediatamente y pongase en contacto con MILLET Innovation.

MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. El francés es el idioma de referencia. Marcado CE inicial: 2001.

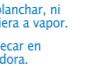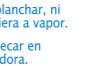

DANSK

DIGITUBES® med Epithelium™

INDIKATIONER

Beskytter tær og fingre, forebygger dannelse af ligtorne og vabler, samt lindrer smerten...

KONTRAINDIKATIONER

- Må ikke bruges i tilfælde af hudlæsioner.
- Hvis det drejer sig om personer, der lider af arteritis, diabetes, polyneuritis eller neuropati i underekstremiteterne eller bensår: Rådspørg en læge eller en fodlæge og hold opsyn med fodden under anvendelse af tåbeskyttelsen.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- Klip en Digitube® i den ønskede længde med en god saks.
- Fjern den beskyttende film, der dækker gelen.
- Gire el Digitube® sobre si mismo y colóquelo en el dedo del pie poniendo la parte con el gel de Epithelium™ en contacto con la zona a proteger.

FUNKTIONSEVNE

- Epithelium™ er en silikongel med næsten samme trykaflastende egenskaber som naturligt cellevæv. Silikongelen i Digitubes® forebygger dannelsen af ligtorne og lindrer smerten, hvis der allerede er opstået hård hud.
- Da de ikke fylder ret meget, er det muligt at bruge Digitubes® på flere tær samtidigt.





VEDLIGEHOLDELSE

- Vaskes i hånden uden at skrubbe.
- Lad lufttørre. Må ikke stryges.

SAMMENSÆTNING: 73% silikon, 27% stof i polyamid/elastan.

Materiale har været genstand for alle prøver til standarden ISO 10 993-1, relativa til produkter, som er i kontakt med huden. Hvis der trods indtræffet en hændelse, stands straks brugen af produktet og underret MILLET Innovation herom.

MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindelig CE-mærkning: 2001.

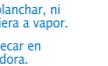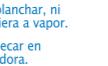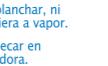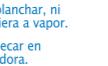

SVENSKA

DIGITUBES® tubformade tå- och fingerskydd med Epithelium™

ANVISNINGAR

Skyddar tår eller fingrar, förhindrar uppkomsten av förhänder, blåsor och verkar smärtlindrande.

WARNINGSTEXT

- Får inte användas på skadad hud.
- Personer som lider av artrit, diabetes, polyneurit, muskelatrofi i benen eller åderbråck bör rådfråga sin läkare eller fotvårdsspecialist samt övervaka foten under användningen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Anpassa längden på Digitube®-skyddet med hjälp av en sax.
- Ta bort filmen som skyddar gelen.
- Vend Digitube® beskyttelsen om, således att den danner et rör. Placér detta på tåen således att Epithelium™ gelen med Epithelium™-gelen mot det område som ska skyddas.

FUNKTIONSEVNE

- Epithelium™ är en silikongel med tryckavlastande egenskaper som liknar hudens egen subkutana vävnad. Silikongelen i Digitubes® motverkar uppkomsten av liktornar och lindrar smärta om det redan har uppstått förhänder.
- Digitubes®-skydden är väldigt tunna och smidiga och kan därför användas på flera intilliggande tår samtidigt.




UNDERHÅLL

- Tvätta för hand utan att gnugga.
- Låt lufttorka. Bör ej strykas.

SAMMANSÄTTNING: 73% silikon, 27% stof i polyamid/elastan.

Materiale har genomgått alla tester som krävs i standarden ISO 10 993-1 för produkter som kommer i kontakt med huden. Om ett problem ändå skulle uppstå, bör du genast sluta använda produkten och underretta MILLET Innovation.

MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindelig CE-mærkning: 2001.

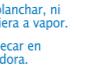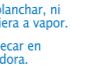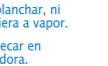

SUOMALAINEN

DIGITUBES®-suojaputket Epithelium™ -geellillä

KÄYTÖTARKOITUS

Varpaidat tai sormien suojaaminen, liikavarpaiden ja rakkojen muodostumisen ehkäiseminen, kipujen lievitys...

VASTA-AIHEET

- Älä käytä haavaisella tai vahingoittuneella ihollla.
- Henkilöt, jotka kärsivät valtimotulehdusista, diabeteksestä, polyneuriitista, alaraajojen neuropatiasta tai säärivaivoista: kysy neuvoa lääkäristä tai jalkahoitalta ja tarkkaile jaljoihin käytöllä aikana.

VAROTOIMENPITEET

- Leikkaa Digitube®-suojaputki kunnollisilla saksilla halutun pituisesti.
- Poista geeliä peittävä suojakalvo.
- Käännä Digitube®-suojaputki osittain nurin päin, jolloin se on helppo pujottaa varpaaseen kaulukseen avulla asettamalla Epithelium™-geeli suojaattavaa aluetta vasten.

TOIMINTA

- Epithelium™ on silikonigeeli, jonka paineen jakautumista edistäävät ominaisuudet muistuttavat ihmalaisten kudoksen ominaisuuksia. Materiaalin käyttö Digitube®-suojaputkissa auttaa ehkäisemään liikavarpaiden muodostumista ja lievittämään kipua, jos kovettumia on jo ehtinyt muodostunut.
- Digitubes®-skydden är väldigt tunna och smidiga och kan därför användas på flera intilliggande tår samtidigt.

HOITO





- Käsipesu, älä hankaa.
- Anna kuivua itsestään. Älä silitä.

KOOSTUMUS:

73% silikonia, 27% polyamidi-/elastanväv.

Materiale har genomgått alla tester som krävs i standarden ISO 10 993-1 för produkter som kommer i kontakt med huden. Om ett problem ändå skulle uppstå, bör du genast sluta använda produkten och underretta MILLET Innovation.

MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindelig CE-mærkning: 2001.

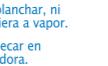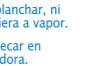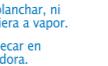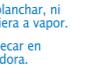

FRANÇAIS

DIGITUBES® à l'Epithelium™

INDICATIONS

Protéger les orteils ou les doigts, prévenir la formation de cors, d'ampoules et soulager les douleurs...

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas de personnes souffrant d'arthrite, de diabète, de polynévrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères: demander conseil à votre médecin ou à votre podologue, puis surveiller votre pied pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Découper un Digitube® avec de bons ciseaux à la longueur désirée.
- Enlever la pellicule de protection recouvrant le gel.
- Retourner le Digitube® sur lui-même de façon à obtenir un manchon et le mettre en place sur l'orteil en positionnant le gel d'Epithelium™ en contact avec la zone à protéger.

FONCTIONNALITÉS

- L'Epithelium™ est un gel silicone dont les propriétés de répartition des pressions sont proches de celles des tissus sous-cutanés. La présence de ce matériau dans les Digitubes® permet d'éviter la formation de cors et de soulager la douleur lorsque les callosités sont déjà formées.
- De par leur faible encombrement, il est possible d'utiliser des Digitubes® simultanément sur des orteils voisins.

ENTRETIEN






- Laver à la main, sans frotter.
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

COMPOSITION : 73% silicone, 27% tissu polyamide/élasthanne.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si un incident ISO 10 993-1 se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.

Toute utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2001.

Réf. 10117-L 04-2019

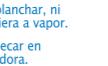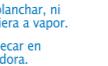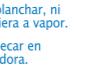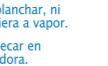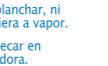

ENGLISH



DIGITUBES® with Epithelium™

INDICATIONS

Protect toes or fingers, prevent formation of corns and blisters, and alleviate pain.

CONTRAINDICATIONS

- Do not use on a skin lesion.
- Persons with arteritis, diabetes, polyneuritis, peripheral neuropathy, or foot ulcers: consult your physician or chiropodist before application and monitor your foot during use.

PRECAUTIONS FOR USE

- Use a good pair of scissors to cut the Digitube® to the required length.
- Remove the protective film covering the gel.
- Turn the Digitube® inside out and place it on the toe, making sure that the Epithelium™ gel is in contact with the area you wish to protect.

WHAT IT IS USED FOR


- Epithelium™ is a silicone gel with similar pressure distribution properties to those of human subcutaneous tissue. The presence of this substance in Digitubes® prevents corn formation and alleviates pain when calluses have already formed.
- Because they are not bulky, Digitubes® can be used on two consecutive toes at the same time.

CLEANING


- Hand-wash, without scrubbing.
- Leave to dry naturally. Do not iron.

COMPOSITION: 73% silicone, 27% polyamide/elastane fabric.


The materials used have passed all the regulatory tests required by ISO standard 10993-1 relating to products that come into contact with the skin. If an incident occurs, stop using the product immediately and inform MILLET Innovation. MILLET Innovation cannot be held responsible for failure to use the product in accordance with the manufacturer's recommendations. French is the reference language. CE initial marking: 2001.

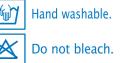

Hand washable.

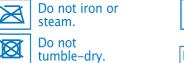

Do not iron or steam.

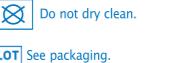

Do not dry clean.



Do not bleach.



Do not tumble-dry.



LOT See packaging.

NEDERLANDS



DIGITUBES® met Epithelium™

INDICATIE

Beschermen tenen of vingers, voorkomen de vorming van likdoorns, blaren en verlichten pijn...

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Personen die lijden aan arteritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of zweren: vraag raad aan uw arts of podoloog, vervolgens uw voet opvolgen gedurende het gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Knip een Digitube® met een goede schaar op de gewenste lengte.
- Verwijder het beschermraasje op de gel.
- Draai de Digitube® om een manchet te vormen en plaats deze op de teen, zodat de Epithelium™ gel in contact staat met de te beschermen zone.

FUNCTIONALITEIT

- Epithelium™ is een siliconengel waarvan de eigenschappen voor het verdelen van druk erg lijken op die van de onderhuidse weefsellaag. Door de aanwezigheid van dit materiaal in de Digitubes® wordt de vorming van likdoorns voorkomen en pijn verlicht als de eeltplekken al gevormd zijn.
- Door hun kleine formaat kunnen de Digitubes® gelijktijdig op naast elkaar gelegen tenen worden gebruikt.

ONDERHOUD

- Op de hand wassen, niet wrijven.
- Aan de lucht laten drogen. Niet strijken.

SAMENSTELLING: 73% siliconen, 27% polyamide/elastane weefsel.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 993-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruiksaadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referenttaal is Frans. Initieel CE-label: 2001.



Alleen handwas.



Niet strijken, geen stoom.



Geen droogkuis.



LOT Zie verpakking.

DEUTSCH



DIGITUBES® aus Epithelium™

INDIKATION

Schützt Zehen oder Finger, beugt der Bildung von Hühneraugen oder Blasen vor und wirkt schmerzlindernd...

GEGENANZEIGEN

- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Bei Arteritis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Gliedmaßen oder Ulcera: fragen Sie Ihren Arzt, und beobachten Sie Ihren Fuß während der Verwendung.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Schneiden Sie einen Digitube® mit einer scharfen Schere auf die gewünschte Länge zu.
- Ziehen Sie die Schutzfolie ab, die das Gel bedeckt.
- Stülpen Sie den Digitube® um, sodass Sie einen Schlauch erhalten und platziieren Sie ihn auf der Zehe, wobei das Epithelium™ Gel in Kontakt mit dem zu schützenden Bereich kommt.

EIGENSCHAFTEN

- Epithelium™ ist ein Silikongel, dessen Eigenschaften bei der Druckverteilung denen des Unterhautgewebes ähnlich sind. Die Verwendung dieses Materials in den Digitubes® ermöglicht es, die Bildung von Hühneraugen zu verhindern und den Schmerz zu lindern, wenn bereits Verhärtungen entstanden sind.
- Durch ihre kleine Größe können die Digitubes® gleichzeitig auf naast elkaar gelegenen Zehen verwendet werden.

REINIGUNG

- Von Hand waschen, nicht reiben.
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

ZUSAMMENSEZUNG: 73% Silikon, 27% Polyamid/Elasthan.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2001.




Von Hand waschbar.



Nicht bügeln (kein Dampf).



Nicht chemisch reinigen.

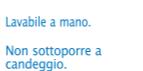

LOT Siehe Verpackung.

ITALIANO



DIGITUBES® all'Epithelium™

INDICAZIONI

Per proteggere le dita dei piedi, prevenire la formazione di calli e vesciche, dare sollievo ai dolori generati da pressione o sfreccamento...

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare su una lesione cutanea.
- Per le persone che soffrono di arterite, diabete, polinevrite, neuropatia degli arti inferiori o ulcera: chiedere consiglio al vostro medico o al vostro podologo, e controllare il piede durante l'utilizzo.

MISURE PRECAUZIONALI

- Ritagliare un Digitube® alla lunghezza desiderata con l'aiuto di forbici a lama dritta.
- Togliere la pellicola protettiva che ricopre il gel.
- Rigirare su se stesso il Digitube® in modo da ottenere un piccolo cilindro e posizionarlo sul dito avendo cura di mettere il gel di Epithelium™ -gelen dekkerr området som skal beskyttes.

FUNZIONALITÀ

- L'Epithelium™ è un gel in silicone le cui proprietà di distribuzione delle pressioni sono simili a quelle dei tessuti in Digitubes® permette di evitare la formazione di calli e di dare sollievo quando le callosità sono già presenti.
- Grazie al loro ridotto spessore, si possono applicare contemporaneamente su dita vicine senza alcun fastidio.

MANUTENZIONE

- Lavare a mano, senza sfricare.
- La lattuga asciugare naturalmente. Non stirare.

SAMMENSETNING: 73% silikon, 27% stoff av polyamid/elastan.

Materialene har vært gjenstand for alle reglementære tester i henhold til ISO-standarden ISO 10 993-1 som gjelder for produkter som vil komme i kontakt med huden. Dersom det likevel skulle oppstå et problem, slutt umiddelbart å bruke produktet og meld fra til selskapet MILLET Innovation.


Firmaet MILLET Innovation kan ikke holde ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig CE-merkning: 2001.



Lavabile a mano.



Non stirare con vapore.

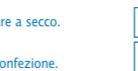

Non lavare a secco.



LOT Vedere la confezione.

NORSK



DIGITUBES® med Epithelium™

INDIKASJONER

Beskytter tær eller fingre, forebygger dannelse av liktorner eller blemmer samt lindrer smerten.

KONTRAINDIKASJONER

- Må ikke brukes på lesjoner i huden.
- For personer som lider av arteritt, diabetes, polynevritt, neuropati i bena eller ulcus: se lege eller fotterapeut om nåd, og hold øye med foten din under bruk.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

- Klipp en Digitube® i ønsket lengde med en saks.
- Fjern beskyttelsesfilmen som dekker gelen.
- Rulla Digituben® til en ring og plasser den på tåen slik at Epithelium™ -gelen dekkerr området som skal beskyttes.

FUNKSJONER

- Epithelium™ er en silikongel med trykkavlastende egenskaper som er tilnærmet lik hudens subkutane vev. Silikongelen i Digitube® motvirker dannelsen av liktorner og lindrer smerten dersom hard hud allerede er dannet.
- Digitube®-beskyttelsen er så tynn at det er mulig å bruke på flere tilstøtende tær samtidig.

VEDLIKEHOLD

- Vaskes for hånd uten å gni.
- La lufttørke. Må ikke strykes.

SAMMENSETNING: 73% silikon, 27% stoff av polyamid/elastan.

Materialene har vært gjenstand for alle reglementære tester i henhold til ISO-standarden ISO 10 993-1 som gjelder for produkter som vil komme i kontakt med huden. Dersom det likevel skulle oppstå et problem, slutt umiddelbart å bruke produktet og meld fra til selskapet MILLET Innovation.

Hvilket selskap MILLET Innovation ikke er ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Den franske referansespråket. Opprinnelig CE-merkning: 2001.



Kan vaskes for hånd.



Må ikke strykes eller dampes.



Må ikke tørkes i torktrommel.




Døn sylinderwætsel, døt og met øtøm.



Må ikke vaskes i klor eller erlaubt.



Døn stegnumwætsel, støpøntwætsel, leukantikto.

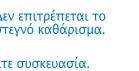

Døn epitelprøvawætsel, klor, lot.

Døn epitelprøvawætsel, klor, lot.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ με ΕΠΙΘΗΛΙΟ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προστατεύουν τα δάχτυλα των ποδιών ή των χεριών, προλαμβάνουν κάλους και φουσκάλες και ανακουφίζουν από τον πόνο...

ΑΝΤΕΙΔΕΙΞΕΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση ολιγοίωσεων στο δέρμα.
- Περιπτώση στόμων με αρθρίτιδα, δισβήτη, πολυνευρίτιδα, νευροπαθία των κάτω άκρων ή εξέκαμπα: ζητήστε συμβουλές από τον πάτορα ή τον ποδολόγο, σας και στη συνέχεια πρακτούστε το πόδι σας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Κόψτε ένα Digitube® χρησιμοποιώντας ένα κοφτέρο ψαλίδιο, στο μήκος που επιθυμείτε.
- Αφράτε το προστατευτικό κόλυμα που καλύπτει τη γέλη.
- Ενώστε τις άκρες του Digitube® τόσο ώστε να αποκτήσετε συνέχεια κυλινδρικού σχήματος, και τοποθετήστε το πόδι σας στο δάχτυλο του ποδιού, ποτοθετώντας τη γέλη με Epithelium™ επάνω στην περιοχή που θέλετε να προστατεύετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Το Epithelium™ είναι ένα επίθεμα γέλης στηλικόνης, του οποίου οι ιδιότητες κατανομής πίεσεων είναι παρόμοιες με αυτές του υποδόριου λιστού. Η παρούσα κυλικέρισμα στα Digitubes® αποτέλεστε τη δημιουργία κάλων, ενώ ανακουφίζει από τον πόνο διάντα της επιτορπής.
- Καθώς είναι πολύ λεπτά, πμπρέτε να χρησιμοποιείτε τα Digitubes® ταυτόχρονα, σε παρακέμενα δάχτυλα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πλένεται στο χέρι, χωρίς τρίψιμο.
- Αφράτε να στεγνώσουν ελεύθερα. Μην σιδερώνετε.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Τα υλικά έχουν υποβληθεί σε όλες τις κανονιστικές δοκιμές που επιβάλλονται από το πρότυπο ISO 10 993-1 σημείκα με το οποίον τα πρότυπα σε επαγκρήψη με το δέρμα. Ωστόσο, σε περίπτωση περιστατικού θα πρέπει να διαλέγετε αμέσως τη χρήση, και να κανείστε ενημερωτές την MILLET Innovation.

Η επιστρέφει τη MILLET Innovation δεν χρησιμοποιείται με τρόπο αντίθετο προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική σημάνση C. 2001.