

## CORRETOR com EPITHELIUM™

## INDICAÇÕES

Limitar e corrigir o desvio do dedo grande (Hallux valgus), alinhand-o.

## CONTRAINDICAÇÕES:

- Não utilizar sobre uma lesão cutânea.
- No caso de pessoas que sofram de arterite, diabetes, neuropatia dos membros inferiores ou úlceras varicosas: nunca devem utilizar o produto sobre uma ferida, vigie o pé durante a utilização e, em todo o caso, peça conselho ao seu médico ou podologista.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- Lavar antes da 1ª utilização.
- Para obter um corretor, posicionar dois meios-corretores um contra o outro.
- Colocar o corretor assim obtido entre o dedo grande do pé e o 2o dedo, com a parte mais larga em cima ou em baixo, conforme o conforto sentido.

## FUNCIONALIDADES

- O corretor permite separar os dedos do pé de alguns milímetros. O EPITHELIUM™ é um gel de silicone, cujas características visco-elásticas e mecânicas se assemelham aos tecidos do pé. O material flexível e a forma do corretor, em adequação com o pé, proporcionam um conforto imediato.







## CONSERVAÇÃO

- Lavar após utilização. As proteções podem ser lavados com água e sabão.
- Descarte e substitua o dispositivo, caso apareçam fissuras no gel.
- Deixar secar naturalmente.

## COMPOSIÇÃO: 100% silicone.

Em caso de dor ou qualquer outra reação fora do normal, consulte o seu médico. Quaisquer incidentes graves envolvendo o dispositivo, devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente.

A empresa "MILLET Innovation", não pode ser responsabilizada no caso de utilização que não esteja em conformidade com as recomendações do fabricante. O idioma de referência é o francês. Marcação CE inicial: 2004.

 Lavável à mão.	 Não passar a ferro.	 Não limpar a seco.
 Não usar lixívia.	 Não secar à máquina.	 Ver embalagem.

## SEPARADORES DE JUANETE con EPITHELIUM™

## INDICACIONES

El separador de juanete de EPITHELIUM™ limita la desviación del dedo gordo (Hallux Valgus) y mejora su alineación.

## CONTRAINDICACIONES

- No lleve sobre una lesión cutánea.
- En el caso de personas que padezcan arteritis, diabetes, neuropatías de miembros inferiores o úlceras varicosas: no utilice nunca el producto directamente sobre una herida, vigile el pie durante el uso y solicite siempre consejo a su médico o podólogo.

## PRECAUCIONES DE USO

- Lavar antes del primer uso.
- Coloque dos mitades de los separadores una junto a otra.
- Coloque el separador que se obtiene entre el 1er y el 2º dedo del pie.
- Si utiliza sólo una mitad del espaciador, obtiene un separador, indicado especialmente para callos interdigitales.

## FUNCIONES

- El separador permite alinear el dedo gordo y evita que se superponga sobre los dedos vecinos. Fabricado con EPITHELIUM™, cuyas propiedades viscoelásticas y mecánicas son similares a las de los tejidos subcutáneos. Este material flexible y la forma específica del separador, adaptada al pie, procuran un confort inmediato.







## MANTENIMIENTO

- Lavar después de su uso. Las protecciones pueden lavarse con agua y jabón.
- Deseche y reemplace el dispositivo en cuanto se note la aparición de grietas en el gel.
- Duración: 2 meses aproximadamente (respetando las condiciones de uso).

## COMPOSICIÓN: 100% de silicona.

En caso de dolor o cualquier otra reacción inusual, consulte a su médico. Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad sanitaria competente.

MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2004.

 Lavable a mano.	 No planchar, ni squiera a vapor.	 No lavar en seco.
 No usar lejía.	 No secar en secadora.	 Ver embalaje.

## TÅADSKILLERE med EPITHELIUM™

## INDIKATIONER

Den EPITHELIUM™ tåadskiller begrænser storetåens skævhed (Hallux Valgus) og fremmer dens lige linje.

## KONTRAINDIKATIONER

- Må ikke bruges i tilfælde af hudlæsioner.
- For personer, der lider af arteritis, diabetes, neuropati i benene eller bensår : brug aldrig produktet direkte på sår eller hudskade, og hold øje med foden under brugen og i alle tilfælde spørg Deres læge eller fodspecialist til råds.

## FORSIGTIGHEDSREGLER

- Vask før første anvendelse.
- Anbring to halv-tåadskillere mod hinanden.
- Placer den fremkomne tåadskiller mellem 1. og 2. tå : den bredeste del skal anbringes under foden.
- Ved kun at bruge en halv-tåadskiller får De en separator, der er specielt egnet ved ligtorne mellem tærerne.

## FUNKTIONSEVNE

- Tåadskilleren gør det muligt at bringe storetåen i lige linje og undgå dens overlejring på nabotærerne. Produktet er fremstillet af EPITHELIUM™, hvis viskoelastiske og mekaniske egenskaber ligner underhudsvævets egenskaber. Det bløde materiale og tåadskillerens særlige form, der er i overensstemmelse med foden, giver en øjeblikkelig komfort.

## VEDLIGEHOLDELSE

- Vaskes efter brug. Plastrene kan vaskes med vand og sæbe.
- Produktet skal kasseres og udskiftes hvis der opstår revner i gelen.
- Levetid : ca. 2 måneder (når man overholder brugsbetingelserne).

## SAMMENSÆTNING: 100 % silikon.

I tilfælde af smerter eller andre utilsigtede reaktioner, skal egen læge kontaktes. Alle utilsigtede hændelser, der er forårsaget af produktet, skal rapporteres til producenten og den relevante sundhedsmyndighed.

MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindelig CE-mærkning: 2004.

 Skal håndvaskes.	 Tåler ikke strykning eller damp.	 Tåler ikke kemisk rensning.
 Tåler ikke klorblegning.	 Tåler ikke tørretumbler.	 Se emballagen.

## AVDELARE med EPITHELIUM™

## ANVISNINGAR

Avdelaren i EPITHELIUM™ begränsar stortåns avvikelse (Hallux Valgus) genom att rikta den rakt fram.

## VARNINGSTEXT

- Får inte användas på skadad hud.
- De personer som lider av arterit, diabetes, neuropati i nedre lemmar eller åderbråck. aldrig använda produkten direkt på ett sår, kontrollera foten under användning och alltid kontakta läkare eller fotspecialist för att få rådgivning.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Bör tvättas innan den första användningen.
- Placera de två halvorna mot varandra.
- Placera den uppnådda avdelaren mellan den 1:a och 2:a tån den största delen skall sitta under foten.
- Genom att endast använda en halv avdelare, uppnås en separator, särskild avsedd för interdigitala liktornar.

## FUNKTIONER

- Avdelaren riktar stortån framåt genom att undvika att den korsas med intilliggande tår. Den är gjord i EPITHELIUM™, vars viskoelastiska och mekaniska egenskaper är väldigt lika de subkutana vävnadernas. Avdelarens mjuka material, samt dess unika form skänker omedelbar komfort i kontakt med foten.







## UNDERHÅLL

- Tvätta efter användning. Plåstren går att tvätta med vatten och tvål.
- Kasser a genast och ersätt med ny produkt om det uppstår sprickor i gelen.

- Hållbarhet : ungefär 2 månader (vid korrekt användning).

## SAMMANSÄTTNING: 100% silikon.

Kontakta läkare vid smärta eller annan ovanlig reaktion. Alla allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren och inköpsställe. Företaget MILLET Innovation kan inte ställas till svars om tillverkarens användningsråd inte följs. Referensspråk är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2004.

 Kan handtvättas.	 Får inte strykas eller ångas.	 Får inte kemtvättas.
 Använd inte blekmedel.	 Tål inte torktumlning.	 Se förpackningen.

## EPITHELIUM™-LOITONTAJA

## INDIKAATIOT

EPITHELIUM™ -loitontaja ehkäisee, ja se rajoittaa isonvarpaan siirtymistä (Hallux Valgus) ja pitää sen oikeassa asennossa.

## VASTA-AIHEET

- Älä käytä haavaisella tai vahingoittuneella iholla.
- Valtimotulehdus, diabetes, alaraajojen herpesairaus tai säarihaava tapauksissa: älä koskaan aseta tuotetta haavan päälle, tarkkaile jalkaa käytön aikana ja kysy aina uuvuo lääkäritäisi tai jalkasairauksien hoitoon erikoistuneelta lääkäritä.

## VAROTOIMENPITEET

- Pestävä ennen käyttöönottoa.
- Laita loitontajan puolikkaat vastakkain.
- Näin muodostunut erottaja asetetaan 1. ja 2. varpaan väliin: leveämpi pää tulee sijoittaa alas päin.
- Käytettäessä vain loitontajan puolikasta saat erottajan, joka sopii käytettäväksi liikavarpaiden hoitoon.

## TOIMINTA

- Loitontaja auttaa pitämään isonvarpaan suorassa ja estää näin sen siirtymistä viereisten varpaiden päälle. Se on valmistettu EPITHELIUM™, jonka viskoelastiset ja mekaaniset ominaisuudet ovat lähellä ihonalaisten kudosten vastaavia ominaisuuksia.

## HOITO

- Pese käytön jälkeen. Levyjä voi pestä saippuavedellä.
- Hävitä heti laite ja vaihda se uuteen, jos geelissä näkyy halkeamia.
- Käyttöikä: noin 2 kuukautta (jos käyttöohjeita noudatetaan).

## KOOSTUMUS: 100% silikonilla.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee kipua tai jokin muu epätavallinen reaktio. Kaikista laitteeseen liittyvistä merkittävistä tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja asianmukaiselle terveysviranomaiselle.

MILLET Innovation ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä. Ranskan on viittaus kieli. Alkuperäinen CE-merkintä: 2004.

 Pesu käsin.	 Ei silytystä tai höyryä.	 Eikuivapesua.
 Ei klooria.	 Ei koneellista kuivautusta.	 Katso pakkausta.

## ÉCARTEUR à l'EPITHELIUM™

## INDICATIONS

Pour limiter la déviation du gros orteil (Hallux Valgus) en améliorant son alignement.

## CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit directement sur une plaie, un mal perforant, surveiller le pied pendant l'utilisation et dans tous les cas demander conseil à votre médecin ou podologue.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Laver avant la 1<sup>ère</sup> utilisation.
- Positionnez deux demi-écarteurs l'un contre l'autre.
- Placez l'écarteur obtenu entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> orteil. Vous pouvez placer indifféremment la partie la plus large en haut ou en bas selon le confort ressenti.
- En utilisant un demi-écarteur seulement, vous obtenez un séparateur, spécialement indiqué dans le cas de cors interdigitaux.

## FONCTIONNALITÉS

- L'écarteur permet d'aligner le gros orteil en évitant son chevauchement sur les orteils voisins. L'EPITHELIUM™ est un gel de silicone dont les propriétés viscoélastiques et mécaniques sont proches de celles des tissus sous-cutanés. Le matériau souple et la forme de l'Écarteur, en adéquation avec le pied, procurent un confort immédiat.

## ENTRETIEN

- Laver après utilisation. Les protections sont lavables à l'eau et au savon.
- Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de fissures dans le gel.
- Réutilisables pendant 1 à 2 mois.

## COMPOSITION : 100 % silicone.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.

Le Français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2004.

   	 Lavable à la main.	 Pas de repassage, ni de vapeur.	 Pas de nettoyage à sec.
 	 Pas de chlorage.	 Pas de séchage en machine.	 Voir emballage.

## SPREADERS with EPITHELIUM™

### INDICATIONS

The EPITHELIUM™ spreader limits deviation of the big toe (Hallux Valgus) by improving its alignment.

### CONTRAINDICATIONS

- Do not use on a skin lesion.
- Special warning for persons with arteritis, diabetes, lower-limb neuropathy or varicose ulcers: never use the product directly on a wound or perforating sore, watch foot throughout use and, in all cases, ask the opinion of your physician or podiatrist.

### PRECAUTIONS FOR USE

- Wash before first use.
- Put two half-spreaders together.
- Insert the resulting spreader between the 1st and 2nd toe: the widest part should be located under the foot.
- The half-spreaders alone are indicated for metatarsal corns.

### WHAT IT IS USED FOR

- The Spreader helps align the big toe by preventing it from overlapping with neighbouring toes. EPITHELIUM™ is a silicone gel with mechanical properties close to those of some natural human tissue.

### CARE


- Wash after use. Protections may be washed with soap and water.
- Discard and replace the device as soon as cracks in the gel appear.
- Lasts approximately 2 months (when directions for use are followed).

### COMPOSITION: 100% silicone.


In case of pain or any other unusual reaction, contact your doctor. Any major incidents involving the device must be reported to the manufacturer and the relevant health authority. Millet Innovation cannot be held responsible for failure to use the product in accordance with the manufacturer's recommendations. French is the reference language. CE initial marking: 2004.




Hand washable.

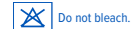


Do not bleach.

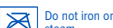

Do not iron or steam.

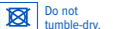

Do not tumble-dry.

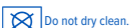

Do not dry clean.



See packaging.



Alleen handwas.



Niet bleken.



Niet strijken, geen stoom.



Niet drogen in de droogtrommel.



Geen droogkuisk.



Zie verpakking.

## ZEHENSPREIZER mit EPITHELIUM™

### ANWENDUNGSGEBIETE

Der Zehenspreizer aus EPITHELIUM™ schränkt die Verlagerung der Großzehe ein (Hallux Valgus) und verbessert ihre Ausrichtung.

### GEGENANZEIGEN

- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Personen mit Arteriitis, Diabetes, Neuropathie der unteren Gliedmaßen oder Krampfadergeschwüren: Sie sollten das Produkt niemals direkt auf einer Wunde oder einer perforierenden Ulzeration anwenden, den Fuß während der Anwendung überwachen und auf alle Fälle Ihren Arzt oder Med.Fußpfleger um Rat fragen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der ersten Anwendung waschen.
- Zwei halbe Zehenspreizer gegeneinander legen.
- Den erzielten Zehenspreizer zwischen die 1. und 2. Zehe legen: Der breitere Teil muss unter dem Fuß liegen.
- Wenn Sie nur einen halben Zehenspreizer verwenden, erhalten Sie einen Zehentrenner, der besonders bei Hühneraugen zwischen den Zehen geeignet ist.

### EIGENSCHAFTEN

- Der Zehenspreizer ermöglicht die Ausrichtung der großen Zehe und vermeidet das Aufliegen auf den Nachbarzehen. Er besteht aus EPITHELIUM™ ist ein Silikonel. Seine mechanischen Eigenschaften ähneln bestimmten menschlichen Geweben. Dieses weiche Material und die spezifische Form des an den Fuß angepassten Zehenspreizers schenkt sofortigen Komfort.

### PFLEGE

- Nach Gebrauch waschen. Der Schutz kann mit Wasser und Seife ausgewaschen werden.
- Das Produkt entsorgen und ersetzen, sobald Risse im Gel auftreten.
- Lebensdauer: ca. 2 Monate (bei Einhaltung der Anwendungsbedingungen).

### ZUSAMMENSETZUNG: 100% Silikon.

Bei Schmerzen oder einer anderen ungewöhnlichen Reaktion wenden Sie sich an Ihren Arzt. Schwere Zwischenfälle, die in Zusammenhang mit dem Produkt stehen, sind dem Hersteller und der zuständigen Gesundheitsbehörde zu melden.


Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2004.



Von Hand waschbar.



Bleichen mit Chlor nicht erlaubt.

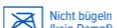

Nicht bügeln (kein Dampf).



Nicht maschinentrecknen.



Nicht chemisch reinigen.



Siehe Verpackung.

## DIVARICATORI con EPITHELIUM™

### INDICAZIONI

Il Divaricatore EPITHELIUM™ limita la deviazione dell'alluce (Hallux Valgus), migliorandone l'allineamento.

### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare su una lesione cutanea.
- In soggetti che soffrono di arterite, diabete, neuropatia degli arti inferiori o ulcere varicose: non utilizzare mai il prodotto direttamente su ferite, piaghe, mali perforanti. Controllare il piede durante l'utilizzo e, in ogni caso, chiedere consiglio al proprio medico o podologo.

### MISURE PRECAUZIONALI

- Lavare prima del primo utilizzo.
- Posizionare due mezzi divaricatori uno contro l'altro.
- Collocare il divaricatore così ottenuto tra l'alluce e il secondo dito: la parte più larga deve trovarsi sotto il piede.
- Utilizzando un mezzo divaricatore da solo, si ottiene un separatore, particolarmente utile in caso di calli interdigitali.

### FUNZIONALITÀ

- Il Divaricatore permette di allineare l'alluce evitando l'accavallamento di quest'ultimo sulle dita vicine. E' realizzato in epitelio (EPITHELIUM™), le cui proprietà visco-elastiche e meccaniche sono simili a quelle dei tessuti sotto-cutanei. Questo materiale morbido e la particolare forma del divaricatore, realizzato seguendo la forma del piede, regalano un comfort immediato.


### MANUTENZIONE

- Lavare dopo l'uso. Le protezioni possono essere lavati con acqua e sapone.
- Gettare e sostituire il dispositivo in presenza di fessurazioni nel gel.
- Durata: due mesi circa (rispettando le condizioni di utilizzo).

### COMPOSIZIONE: 100% silicone.

In caso di dolore o di qualsiasi altra reazione anomala, contattare il medico. Eventuali incidenti gravi attinenti al prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità sanitarie competenti.

La società MILLET Innovation declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante. Il francese è la lingua di riferimento. Marcatura CE originale: 2004.

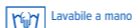


Lavabile a mano.



Non sottoporre a candeggio.



Non tirare e non trattare con vapore.

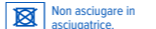

Non asciugare in asciugatrice.



Non lavare a secco.



Vedere la confezione.

## ATSKILLERE med EPITHELIUM™

### INDIKASJONER

Begrenser stortåens skjevhet (Hallux valgus) ved å rette den opp.

### KONTRAINDIKASJONER

- Må ikke brukes på lesjoner i huden.
- Personer med arteritt, diabetes, nevropati i bena eller varikøse sår: Aldri bruk produktet på et sår, hold øye med foten under bruk, og søk alltid råd hos din egen lege eller fotpleier.

### FORHOLDSREGLER VED BRUK

- Må vaskes før bruk.
- For å få én atskiller, plasser to halve atskillere mot hverandre.
- Plasser så denne atskilleren mellom stortåen og den andre tåen, med den bredeste delen øverst eller nederst, avhengig av hva du foretrekker.

### FUNKSJONER

- Atskilleren gjør det mulig å atskille tærne med noen millimeter. Den inneholder EPITHELIUM™, en silikongelé som er anerkjent for sin evne til å fordele trykk og redusere gnidninger.
- Det myke materialet og atskillerens form, som passer til fotens, gir en øyeblikkelig komfort.

### VEDLIKEHOLD

- Vask etter bruk. Plastrene kan vaskes i såpevann.
- Kasser og bytt ut produktet så snart det oppstår sprekker i gelen.
- La lufttørke.

### SAMMENSETNING: 100% silikon.

Hvis det oppstår smerte eller andre uvanlige reaksjoner, må du kontakte legen din. Alvorlige hendelser i forbindelse med bruken av produktet skal man melde fra om, til produsenten og til den kompetente myndigheten.

Firmaet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig EU-merking: 2004.



Kan vaskes for hånd.



Må ikke vaskes i klor eller kløres.



Må ikke strykes eller dampes.



Må ikke tørkes i maskin.



Må ikke tørkes i tørketrommel.



Se emballasjen.

## ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ με EPITHELIUM™

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Περιορισμός της απόκλισης του μεγάλου δακτύλου (βλασιός μέγας δάκτυλος), βελτιώνοντας την ευθυγράμμισή του.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλοιώσεων στο δέρμα.
- Περιπτώσεις ατόμων που πάσχουν από αρθρίτιδα, διαβήτη, νευροπάθεια των κάτω άκρων ή κιρσώδη έλκη: μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν επάνω σε πληγή, να παρακολουθείτε το πόδι κατά τη χρήση και σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον ποδίατρό σας.

### ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Να πλυθεί πριν από την 1η χρήση.
- Για να σχηματιστεί ένα αποστατικό, τοποθετήστε δύο ημι-αποστατικά, το ένα απέναντι στο άλλο.
- Τοποθετήστε το αποστατικό που σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο μεταξύ του μεγάλου δακτύλου και του 2ου δακτύλου, με το πλατύτερο τμήμα ψηλά ή χαμηλά, όπως το αισθάνεστε πιο άνετα.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Το αποστατικό διατηρεί απόσταση μερικών χιλιοστών ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών. Κατασκευάζεται από EPITHELIUM™, μια γέλη σιλικόνης, γνωστή για τις ιδιότητες καταμερισμού της πίεσης και μείωσης της τριβής.
- Το μαλακό υλικό και το σχήμα του αποστατικού, που εφαρμόζει στα πόδια, προσφέρουν άμεση ανακούφιση.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πλύνετε μετά τη χρήση. Οι επίδεσμοι πλένονται με νερό και σαπούνι.
- Απορρίψτε το προϊόν και αντικαταστήστε το αν παρατηρήσετε ρωγμές εντός της γέλης.
- Αφίστε το να στεγνώσει ελεύθερα.

### ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% σιλικόνη.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αν αισθανθείτε πόνο ή παρουσιάσετε κάποια ανυπόστητη αντίδραση. Κάθε σοβαρό συμβάν που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.


Η εταιρεία MILLET Innovation δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο αντίθετο προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική σήμανση C: 2004.




Πλένεται στο χέρι.



Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.

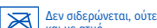

Δεν σιδερώνεται, ούτε και με ατμό.

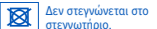

Δεν στεγνώνει στο στεγνωτήριο.



Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα.



Δείτε συσκευασία.